

EL&FLEX



**UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE
FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES**

POURQUOI CHOISIR ELOFLEX?

Avec un Eloflex, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et redécouvrir le plaisir des promenades, voyages et excursions à bord de votre propre voiture. Il existe désormais un fauteuil roulant électrique pratique et utile, conçu en Suède

par des utilisateurs de fauteuils roulants, pour vous rendre la vie plus facile et plus confortable. Laissez-vous convaincre par Eloflex et retrouvez votre liberté !

PLIABLE

Eloflex est une toute nouvelle génération de fauteuils roulants électriques pliables aux caractéristiques uniques. Son design moderne vous permet de le plier d'une seule main. Son format compact vous permettra de le ranger à la maison ou de la transporter dans votre voiture. Il prend peu de place et son poids léger le rend facile à emporter avec vous.



UN POIDS ULTRA LÉGER

Élégant et compact, il est également facile à ranger dans votre voiture pour vos sorties. Désormais, vous n'aurez plus besoin de dépendre du transport adapté et du transport pour personnes handicapées pour vous déplacer. Eloflex vous redonne votre liberté.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

Eloflex a été conçu, mis au point et fabriqué selon les technologies les plus récentes. Ses batteries au lithium-ion très efficaces sont de loin supérieures aux anciennes batteries au plomb, tant en matière de performances que de poids. Les puissants moteurs d'entraînement direct sans balais et sans engrenage sont montés directement sur chaque roue, ce qui les rend à la fois plus silencieux et plus efficaces que les moteurs encombrants utilisés sur les fauteuils roulants électriques classiques.



SUR LA ROUTE

Les fauteuils roulants électriques pliables Eloflex sont parfaits pour les voyages, les excursions en voiture et les trajets en taxi vers votre destination de vacances. Vous pouvez désormais rendre visite à vos petits-enfants, à votre famille et à vos amis en toute liberté.

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE FAUTEUILS ROULANTS ÉLECTRIQUES

Eloflex est un fauteuil roulant électrique disponible dans divers modèles pour tout type de personnes. Quel que soit votre âge ou votre condition physique, Eloflex offre une liberté supplémentaire à la maison

et en déplacement, éliminant le besoin d'une assistance externe. Sa conception légère le rend facile à emballer et à emporter dans votre voiture.

LIBERTÉ INDÉPENDANTE

Il est facile de comprendre à quel point la solution Eloflex impacte positivement la vie quotidienne de nombreuses personnes. Pour commencer, elle offre une solution électrique légère et pliable, parfaite à emporter en voiture et en voyage. Plus important encore, elle offre un nouveau niveau de mobilité qui n'existait pas auparavant en raison de la nature non pliable des fauteuils roulants électriques classiques, qui pèsent souvent entre 80 et 150 kg.

Avec son design compact et son grand confort de conduite, vous n'avez pratiquement aucune limite pour vous déplacer. Vous pouvez vous promener au parc ou vous diriger vers la ville pour découvrir les boutiques, cafés et restaurants animés.



COMPACT & POLYVALENT

Les fauteuils roulants électriques traditionnels sont généralement grands, encombrants et pèsent plus de 100 kg. Il est donc difficile de les transporter, et encore plus de les soulever pour les mettre dans une voiture pour vos sorties. À la maison, ils prennent trop de place et sont assez difficiles à conduire. Mais cette situation pourrait être différente. Avec son fauteuil, Eloflex présente une approche totalement moderne des fauteuils roulants électriques construits en aluminium ou en fibre de carbone. Pliables sans effort, prenant peu de place le fauteuil Eloflex vous changera la vie.

Grâce à ses dimensions compactes, sa propulsion arrière et sa conception de siège identique à celle d'un fauteuil roulant manuel, Eloflex vous offre des performances incomparables. Le rayon de braquage réduit et la haute précision vous permettent de manœuvrer sans effort dans des espaces restreints et au passage portes étroites.



Facile à charger, facile à emporter

ULTRA LÉGER



Conception durable avec garantie de 2 ans

HAUTE QUALITÉ



Deux batteries pour plus de sécurité

LONGUE DISTANCE

MODEL F

Eloflex F est le fauteuil roulant électrique le plus prisé du marché. Grâce à des caractéristiques uniques telles que sa pliabilité, sa conception compacte et son cadre en aluminium léger, il a révolutionné le secteur des technologies d'assistance. Le modèle Eloflex F a redonné la liberté à des milliers d'utilisateurs qui ont des difficultés à marcher.

Ce modèle polyvalent convient aux personnes de tous âges, besoins et objectifs. Sa technologie moderne, dotée de puissants moteurs brushless et de deux batteries au lithium par défaut, offre des performances de conduite exceptionnelles et une autonomie impressionnante dépassant les 30 km.



POIDS EN KG

26

AUTONOMIE EN KM

30

HAUTEUR D'ASSISE EN CM

52

POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR EN KG

120

PUISSANCE EN WATTS

2X 250

MODEL L

Eloflex L est un fauteuil roulant électrique compact et pratique pour les personnes désireuses de se déplacer sans tracas. Il se plie facilement en quelques secondes, ce qui le rend facile à emporter avec vous lorsque vous voyagez en voiture ou en avion.

Le modèle Eloflex L est une excellente option pour ceux qui recherchent facilité et tranquillité d'esprit. Avec des roues pleines, pas besoin de les gonfler et vous pouvez dire adieu aux soucis de crevaison. Son élégant format compact est particulièrement avantageux en intérieur. Il vous permet de passer facilement des portes étroites et de vous déplacer aisément dans des espaces confinés.



POIDS EN KG

25,5

AUTONOMIE EN KM

30

HAUTEUR D'ASSISE EN CM

52

POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR EN KG

120

PUISSANCE EN WATTS

2X 250

MODEL P

Eloflex P dispose d'une fonction d'inclinaison électrique intégrée dans le siège, conçue pour faciliter l'accès au fauteuil. Ce modèle est destiné aux personnes rencontrant des difficultés à se lever d'un fauteuil standard. Avec le levage électrique, les transferts sont plus faciles et plus sûrs. Cela simplifie l'accès aux endroits plus élevés comme les armoires ou étagères, à la maison comme dans les magasins.

Le modèle P présente une hauteur d'assise plus élevée que nos autres modèles, ce qui facilite encore davantage la sortie du fauteuil. Le modèle Eloflex P est un excellent choix pour les utilisateurs légèrement plus grands.



POIDS EN KG

28

AUTONOMIE EN KM

30

HAUTEUR D'ASSISE EN CM

54

POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR EN KG

160

PUISSANCE EN WATTS

2X 250

MODEL D2

Eloflex D2 est un fauteuil roulant électrique pliable innovant, arborant le même design élégant que nos autres fauteuils roulants électriques, mais avec une originalité : il peut être démonté en deux parties. Ces deux parties assurent un poids de chargement de 14 et 16 kg*, ce qui facilite le transport et le chargement du fauteuil dans le coffre de votre voiture.

Le modèle stable D2 est idéal pour les utilisateurs pesant jusqu'à 160 kg et offre confort et facilité de maniabilité. Eloflex D2 vous permet de mener une vie active, qu'il s'agisse de promenades, de voyages ou d'excursions quotidiennes.



POIDS EN KG

14 + 16

AUTONOMIE EN KM

30

HAUTEUR D'ASSISE EN CM

50

POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR EN KG

160

PUISSANCE EN WATTS

2X 250

MODEL H

Avec le modèle Eloflex H, nous avons réalisé l'impossible : un fauteuil roulant électrique puissant spécialement pouvant accueillir des utilisateurs pesant jusqu'à 200 kg. Détail impressionnant, il peut également être plié et transporté dans une voiture ordinaire.

Le modèle H est un fauteuil spacieux offrant d'excellentes caractéristiques de conduite et suffisamment d'espace pour les personnes adultes. Ce modèle offre, pour toutes les personnes de grande taille, une conduite confortable grâce à sa largeur d'assise généreuse, sa hauteur d'assise plus importante et son design.



POIDS EN KG

43

AUTONOMIE EN KM

40

HAUTEUR D'ASSISE EN CM

54

POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR EN KG

200

PUISSANCE EN WATTS

2X 400

MODEL K

Eloflex K est un fauteuil roulant électrique compact, léger et pliable conçu pour les enfants et adolescents âgés de 7 à 15 ans. Le modèle K permet aux enfants et aux jeunes adultes de s'impliquer activement dans leur environnement, ce qui leur permet de participer plus facilement aux activités quotidiennes telles que les sorties scolaires, le shopping, les restaurants, les excursions et les visites à leurs amis et à leur famille, le tout sans avoir besoin de transport spécialisé.

Le modèle K présente un design compact et léger, présentant la même esthétique élégante que les autres modèles Eloflex.



POIDS EN KG

26

AUTONOMIE EN KM

30

HAUTEUR D'ASSISE EN CM

47-52

POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR EN KG

90

PUISSANCE EN WATTS

2X 250

MODEL Z

Eloflex Z est le fauteuil roulant électrique pliable le plus exclusif disponible, tant dans notre propre gamme que sur le marché en général. Ce modèle est conçu pour ceux qui veulent la « crème de la crème » et qui exigent de leur appareil d'assistance les normes les plus élevées. Fabriqué en fibre de carbone, le cadre pèse seulement 23 kg. Son format est compact, flexible et pliable.

Les caractéristiques de conception minutieuse et les détails ingénieux offrent les options de réglage les plus avancées du marché, permettant une individualisation optimale. Des performances de conduite inégalées, une autonomie extraordinaire allant jusqu'à 45 km et une fiabilité exceptionnelle ne sont que quelques exemples des qualités uniques de ce modèle.



POIDS EN KG

20

AUTONOMIE EN KM

30

HAUTEUR D'ASSISE EN CM

52

POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR EN KG

120

PUISSANCE EN WATTS

2X 250

MODEL C3

L'Eloflex C3 combine les caractéristiques les plus appréciées d'un Eloflex avec les avantages de pointe de la construction en fibre de carbone, ce qui le rend incroyablement léger et en fait le compagnon idéal pour une utilisation quotidienne.

Pesant seulement 20 kg, l'Eloflex C3 est doté d'un design élégant complété par des roues robustes et de puissants moteurs Eloflex, garantissant une expérience de conduite supérieure et fluide. Avec une capacité de charge maximale de 160 kg et un espace supplémentaire pour les batteries, l'Eloflex C3 est conçu pour répondre à toutes vos attentes et les surpasser, offrant à la fois fiabilité et mobilité accrue.



POIDS EN KG

20

AUTONOMIE EN KM

30

HAUTEUR D'ASSISE EN CM

55

POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR EN KG

160

PUISSANCE EN WATTS

2X 250

MODEL X

Eloflex X est un modèle différent spécialement conçue pour nos utilisateurs du troisième âge. C'est le fauteuil roulant électrique pour seniors le plus populaire du marché, qui repose sur la technologie croisée. Plier le fauteuil est un jeu d'enfant, il suffit juste de soulever le siège.

Eloflex X est le résultat d'années de retours, de commentaires et de demandes inestimables reçus de nos fidèles utilisateurs les plus âgés. Il s'agit d'un « modèle purement senior » doté de toutes les fonctions et solutions que l'on peut souhaiter.



POIDS EN KG

AUTONOMIE EN KM

HAUTEUR D'ASSISE EN CM

POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR EN KG

PUISSANCE EN WATTS

25

25

51

120

2X 250

MODEL S1

Avec le scooter hybride révolutionnaire et unique d'Eloflex, vous pouvez vous déplacer sans problème tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, tout en transportant facilement votre scooter dans votre voiture ou en l'emportant en avion. Rien ne vous empêche donc de faire de longues promenades, de faire du shopping, de rencontrer vos amis et votre famille et de voyager.

Un scooter léger, facile à emporter, mais suffisamment robuste pour les aventures en plein air dans des environnements difficiles. Eloflex S1 est conçu pour résister à toutes les saisons, y compris les rudes hivers nordiques, ce qui en fait un choix polyvalent et fiable pour une mobilité toute l'année.



POIDS EN KG

AUTONOMIE EN KM

HAUTEUR D'ASSISE EN CM

POIDS MAXIMUM DE L'UTILISATEUR EN KG

PUISSANCE EN WATTS

37,5

30

55-60

120

2X 250

ACCESSOIRES

Personnalisez votre Eloflex en l'adaptant à vos besoins grâce à nos accessoires pratiques et intelligents.



COUSSINS ELOFLEX PREMIUM

Ease by Eloflex propose une gamme de coussins ergonomiques de fabrication suédoise conçus pour optimiser votre expérience utilisateur Eloflex.



SACOCHE LATÉRALE

Avec la sacoche latérale Eloflex, vous pouvez facilement ranger des objets comme votre portefeuille, votre téléphone et d'autres objets de valeur avec un accès facile.



EXTENSIONS DE MANETTE

Eloflex vous propose deux variantes d'extensions de manette pour répondre à un large éventail de besoins.



APPUI-TÊTE RÉGLABLE

L'appui-tête Eloflex est une option très polyvalente pour un soutien supplémentaire de la tête et du cou, conçue pour augmenter le confort et la facilité d'utilisation pour les utilisateurs ayant des besoins différents.




POTENCE DE DIRECTION ACCOMPAGNEUR

Grâce à cette accessoire, les personnes marchant derrière ou à côté du fauteuil roulant peuvent guider le fauteuil roulant électrique à l'aide du joystick, permettant à la personne assise de rouler sans effort.



HOUSSE DE VOYAGE DE PROTECTION

Notre housse de voyage protectrice est l'accessoire parfait pour les amateurs de fauteuils roulants électriques Eloflex qui sont soucieux de leur fauteuil et veulent prendre des précautions supplémentaires lors de leur transport.

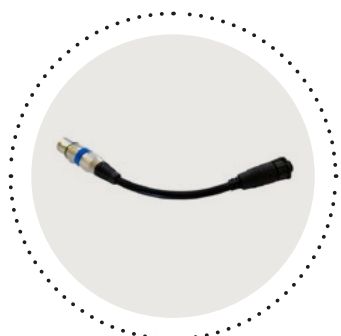

ADAPTATEUR CHARGEUR DIRECT

L'adaptateur chargeur direct Eloflex vous permet de connecter directement le chargeur à la batterie.



REPOSE-PIEDS RÉGLABLE

Notre repose-pieds réglable vous permet d'ajuster son angle de 0 à 90 degrés.



RAMPS DE CHARGEMENT

Chargez facilement votre Eloflex dans la voiture à l'aide de rampes de chargement pliables et faciles à soulever.

EASE ENRICHIT VOTRE EXPÉRIENCE ELOFLEX

La position assise prolongée peut parfois entraîner des gênes au niveau du dos et des fesses, des irritations cutanées, des crampes ou, dans le pire des cas, des escarres et des ulcères. Les coussins

de siège ergonomiques de notre gamme Ease aident à prévenir les inconforts inutiles et à éviter les escarres. Ils soulagent également la douleur et atténuent les problèmes existants.

COUSSIN PREMIUM - EASE ONE

Ease One est un coussin haut de gamme doux et ultra confortable conçu pour les personnes qui passent de longues périodes assises. Le coussin comporte des ressorts hélicoïdaux stratégiquement placés sous les os des fesses et le coccyx. Les contours sont également façonnés pour améliorer le soutien et la stabilité des cuisses. Ease One est particulièrement adapté aux fauteuils roulants électriques, car sa suspension avancée protège le dos et le coccyx sur des surfaces irrégulières.

COUSSIN DE PREMIÈRE QUALITÉ - EASE WEDGE

Ease Wedge est un coussin d'assise surélevé à l'avant. Il est spécialement conçu pour améliorer le confort des personnes aux jambes plus longues qui restent assises pendant de longues périodes. La conception ergonomique répartit la pression et offre une sensation de douceur qui soulage à la fois le fémur, la ceinture pelvienne et le coccyx.

COUSSIN D'ACCOUDOIRS EASE REST

Le coussin d'accoudoir Ease est une housse d'accoudoir conçue pour votre Eloflex. Doté d'un rembourrage en mousse souple de 1 cm d'épaisseur, il vous protège des vibrations tout en réduisant les risques d'escarres et d'irritations. Il améliore également la stabilité, empêchant votre bras de glisser de l'accoudoir.

EASE TUBE SUPPORT DORSALES


Le revêtement du tube arrière Ease est en mousse souple conçu pour le dossier de votre Eloflex. Il offre une sensation plus douce et plus agréable lorsque vous vous adossez à votre fauteuil. Vous bénéficiez également d'un soutien dorsal et d'un confort supplémentaires lorsque vous roulez sur des surfaces irrégulières.

SUPPORT LOMBAIRE EASE LUMBAR

Le Soutien lombaire Ease est conçu en mousse viscoélastique « à mémoire de forme » ferme et durable. Contrairement à la mousse ordinaire, la mousse à mémoire de forme réagit à la chaleur et à la pression du corps, devenant plus douce et épousant la colonne lombaire pour réduire la fatigue du dos.

HOUSSE EASE POUR INCONTINENCE

Gérer l'incontinence lorsqu'on est dans un fauteuil roulant ne devrait pas être stressant ni compliqué. Notre housse imperméable pour incontinence simplifie et protège votre vie quotidienne, vous offrant en même temps une excellente protection contre la pluie et l'humidité lorsque vous êtes à l'extérieur.

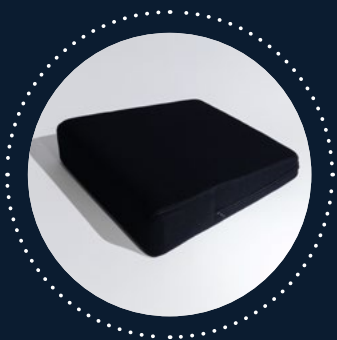

Quand la vie change soudainement

MARIE A TROUVÉ LA VRAIE LIBERTÉ AVEC ELOFLEX



Hopptimisten, ou Marie Hav Lunkvist de son vrai nom, est une femme d'affaires active qui se déplace actuellement en fauteuil roulant en raison d'une maladie. Elle considère la vie comme un cadeau et est pleine d'espoir et d'optimisme !

J'ai reçu mon Eloflex en février 2018, après avoir eu d'autres fauteuils roulants pendant environ six ans. Je suis une personne active qui voyage beaucoup avec des conférences et je suis impliquée dans de nombreuses missions communautaires différentes, à la fois privées et avec la famille. Je voyage à la fois en montagne et dans les archipels, et il est devenu absolument nécessaire pour moi d'avoir un fauteuil roulant électrique flexible et léger pour ces occasions.

Ce n'est pas seulement lorsque je voyage que l'Eloflex m'accompagne, mais tout ce qui concerne l'impossibilité d'entrer dans les magasins bondés ou une chose aussi banale que la porte du voisin qui est trop étroite pour mon



fauteuil roulant électrique habituel, n'est plus qu'un souvenir. Je n'ai plus à m'inquiéter de ne pas pouvoir faire ce que je veux, quand je le veux et comme je l'entends. C'est ça, la liberté !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| MODÈLE | F | L | P | D2 | H | K | C | Z | C3 | X | S1 |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| POIDS NET | 27 kg | 25,5 kg | 30 kg | 14+16 kg | 42,5 kg | 28,5 kg | 16 kg | 23 kg | 20 kg | 25 kg | 37,5 kg |
| GAMME DE VITESSE | 30 km | 30 km | 30 km | 30 km | 40 km | 30 km | 15 km | 30 km | 30 km | 25 km | 30 km |
| POIDS MAXIMAL DE L'UTILISATEUR | 120 kg | 120 kg | 160 kg | 160 kg | 200 kg | 90 kg | 100 kg | 120 kg | 160 kg | 120 kg | 120 kg |
| VITESSE | 6,5 km/h | 6,5 km/h | 6,5 km/h | 6,5 km/h | 8 km/h | 6,5 km/h | 6 km/h | 6,5 km/h | 6,5 km/h | 6,5 km/h | 9 km/h |
| BATTERIE | 2x Lithium ION 10AH/24V | 2x Lithium ION 10AH/24V | 2x Lithium ION 10AH/24V | 2x Lithium ION 10AH/24V | 2x Lithium ION 20AH/24V | 2x Lithium ION 10AH/24V | 2x Lithium ION 12AH/24V | 2x Lithium ION 10AH/24V | 2x Lithium ION 10AH/24V | 2x Lithium ION 10AH/24V | 2x Lithium ION 10AH/24V |
| RAYON DE BRAQUAGE | 78 cm | 76 cm | 85 cm | 89 cm | 99 cm | 78 cm | 60 cm | 78 cm | 87 cm | 88 cm | 100 cm |
| ROUES AVANT | 8" solid | 8" solid | 8" solid | 8" solid | 9" air | 8" comfort | 7" solid | 8" comfort | 10" air | 8" solid | 12" air |
| ROUES ARRIÈRE | 12" air | 10" solid | 12" air | 12" air | 13" air | 12" air | 8,5" solid | 12" air | 12" air | 12" air | 12" air |
| HAUTEUR DU SIÈGE | 52 cm | 52 cm | 54 cm | 50 cm | 54 cm | 47-52 cm | 47,5 cm | 52 cm | 55 cm | 51 cm | 55-60 cm |
| LARGEUR DU SIÈGE | 45/50/55 cm | 45/50/55 cm | 45/50/55 cm | 45/50/55 cm | 51/56/61 cm | 36-44 cm | 44 cm | 49 cm | 43 cm | 45/50/55 cm | 45/50/55 cm |
| PROFONDEUR DU SIÈGE | 43-48 cm | 43-48 cm | 43-48 cm | 44-47 cm | 51 cm | 36 cm | 42 cm | 45 cm | 44 cm | 43-48 cm | 40 cm |
| TAILLE (HXLXP) | 95x63x100 cm | 95x59x99 cm | 90x62x107 cm | 96x62x107 cm | 103x66x115 cm | 89x63x100 cm | 93x57x93 cm | 100x62x110 cm | 95x63x100 cm | 100x62x102 cm | 91x63x105 cm |
| TAILLE PLIÉE (HXLXP) | 75x63x40 cm | 70x59x35 cm | 74x62x40 cm | 67/52x63/63x50/35 cm | 83x66x45 cm | 75x55x36 cm | 79x57,5x32,5 cm | 75x64x37 cm | 75x63x40 cm | 76x32x78 cm | 55x63x105 cm |

Le poids net n'inclut pas les batteries. Pression d'air recommandée pour les roues remplies d'air = 2,5 kg. Eloflex est classé comme dispositif médical auprès de l'Agence suédoise des médicaments et répond aux exigences applicables dans le règlement de l'UE (2017/745), Règlement sur les dispositifs médicaux (MDR), qui garantit la sécurité et la performance des dispositifs médicaux. Il est homologué CE, testé et approuvé conformément aux normes suivantes .EN12184, ISO-7176, IEC-60601 et les batteries sont approuvées pour le vol selon UN38.3.

Visitez le site www.eloflex.eu pour trouver des informations locales, des vidéos, des photos et le revendeur le plus proche.

EL&FLEX
THE SMART WHEELCHAIR FOR ANY OCCASION

Eloflex HQ

Hammarbacken 4B
191 49 Sollentuna
SWEDEN