

EL&FLEX



**EEN NIEUWE GENERATIE
ELEKTRISCHE ROLSTOELEN**

WAAROM KIEZEN VOOR ELOFLEX?

Met een Eloflex heeft u weer controle over uw eigen leven en kunt u weer genieten van wandelingen, uitstapjes en excursies met gebruik van uw eigen auto. Eindelijk is er een praktische en handige elektrische rolstoel, ontworpen door rolstoelgebruikers uit Zweden, om uw leven eenvoudiger en comfortabeler te maken. Onze compacte elektrische rolstoelen en hybridescooters

passen gemakkelijk in kleine ruimtes of bijvoorbeeld in een kast. Hiermee kunt u op stap met het openbaar vervoer, een vliegreis maken of uw eigen- of huurauto blijven gebruiken terwijl u op vakantie bent. Eloflex is precies zoals alle elektrische rolstoelen zouden moeten zijn. Ervaar het verschil met Eloflex en pak uw vrijheid terug!

OPKLAPBAAR

Eloflex is een volledig nieuwe generatie opklapbare elektrische rolstoelen met een veel unieke eigenschappen. Door het slimme ontwerp kunt u hem met één hand opklappen tot een tot een handzaam formaat, passend in de auto of thuis in een kleine ruimte. Hij neemt weinig ruimte in en is dankzij het uitzonderlijk lage gewicht gemakkelijk mee te nemen.



UITZONDERLIJK LAAG GEWICHT

Een elektrische rolstoel van Eloflex weegt tot 80% minder dan een traditionele elektrische rolstoel. Het feit dat hij ook kan worden opgeklapt met één simpele beweging, maakt het een onverslaanbare combinatie. Handzaam en compact en daardoor ook makkelijk mee te nemen in de auto. Eindelijk, nooit meer lang wachten op taxivervoer. Eloflex geeft u uw vrijheid terug.

ULTRAMODERNE TECHNOLOGIE

Eloflex is ontworpen, gebouwd en geproduceerd met behulp van de modernste technologie. De zeer efficiënte Lithium-Ion-accu's zijn veel beter dan de oude loodaccu's, zowel qua prestaties als gewicht. De krachtige borstelloze aandrijfmotoren zijn direct op beide achterwielen gemonteerd, waardoor ze stiller en efficiënter zijn dan de logge motoren die in traditionele elektrische rolstoelen worden gebruikt.



OP DE WEG

Eloflex opklapbare elektrische rolstoelen zijn perfect voor uitstapjes, excursies met de auto en taxiriten naar uw vakantiebestemming. Nu kunt u de kleinkinderen of familie en vrienden bezoeken wanneer het u zelf uitkomt.

EEN NIEUWE GENERATIE ELEKTRISCHE ROLSTOELN

Eloflex is een elektrische rolstoel die verkrijgbaar is in modellen voor alle soorten mensen. Ongeacht uw leeftijd of fysieke conditie, Eloflex zorgt voor extra vrijheid thuis en onderweg, waardoor hulp van buitenaf niet meer nodig is. Dankzij het

lichtgewicht ontwerp kunt u hem gemakkelijk inpakken en meenemen in uw auto. Eindelijk hoeft u nooit meer te afhankelijk te zijn van Paratransit of Gehandicaptentransit.

ONAFHANKELIJKE VRIJHEID

Het is eenvoudig te begrijpen hoe de Eloflex-oplossing het dagelijks leven van zoveel mensen positief beïnvloedt. Om te beginnen is het een opklapbare lichtgewicht elektrische oplossing die perfect is om mee te nemen in de auto en op reis. Nog belangrijker is dat het een nieuw niveau van mobiliteit biedt dat voorheen niet bestond vanwege de niet-opklapbare aard van traditionele elektrische rolstoelen, die vaak tussen de 80 en 150 kg wegen.

Dankzij het compacte ontwerp en het hoge rijcomfort zijn er vrijwel geen grenzen om u te verplaatsen. U kunt door het park cruisen of naar de stad gaan om door de drukke winkels, cafés en restaurants te navigeren.

Dankzij moderne, voor vliegtuigen goedgekeurde accu's kunt u uw Eloflex ook in het vliegtuig inchecken.



COMPACT & VEELZIJDIG

Traditionele elektrische rolstoelen zijn meestal groot, log en wegen meer dan 100 kg. Hierdoor passen ze moeilijk in een auto en zijn ze al helemaal niet in de auto te tillen voor uitstapjes. Thuis nemen ze veel ruimte in beslag en zijn ze onhandig om mee te rijden. Maar dit hoeft niet zo te zijn. Die van Eloflex vertegenwoordigen een volledig moderne benadering van elektrische rolstoelen, gemaakt van aluminium of koolstofvezel. Met een eenvoudige handgreep kan de rolstoel moeiteloos worden opgevouwen, zodat hij zo weinig mogelijk ruimte inneemt en zijn uitzonderlijk lage gewicht gebruikt voor eenvoudig transport in uw auto.

Dankzij de compacte afmetingen, achterwielaandrijving en hetzelfde stoelontwerp als een handbewogen rolstoel, levert de Eloflex vergelijkbare prestaties. Dankzij de kleine draaicirkel en hoge precisie kunt u moeiteloos in krappe ruimtes en door smalle deuren manoeuvreren. Eloflex vertegenwoordigt een nieuwe generatie elektrische rolstoelen met een lichtgewicht frame en een slanke breedte.



Gemakkelijk in te laden,
zeer eenvoudig mee te nemen

ULTRA LICHTGEWICHT



Duurzaam ontwerp met
2 jaar garantie

HOGЕ KWALITEIT



Dubbele accu's voor
extra veiligheid

GROOT BEREIK

MODEL F

Eloflex F is het meest populaire model in de markt. Met unieke eigenschappen zoals de mogelijkheid om op te klappen, het compacte ontwerp en het lichtgewicht aluminium frame, heeft dit model een revolutie teweeggebracht in de technologiesector van de zorg. Eloflex Model F heeft duizenden gebruikers welke slecht ter been zijn de vrijheid teruggegeven.

Dit veelzijdige model is geschikt voor personen van alle leeftijden, wensen en eisen. De nieuwste technologie, de krachtige borstelloze motoren en de twee Lithiumaccu's zorgen voor uitzonderlijke rijprestaties en een indrukwekkende actieradius van meer dan 30 km.



GEWICHT IN KG

26

ACTIERADIUS IN KM

30

ZITHOOGTE IN CM

52

MAX. GEWICHT GEBRUIKER IN KG

120

VERMOGEN IN WATT

2X 250

MODEL L

De Eloflex L is een compacte en eenvoudige elektrische rolstoel voor mensen die veel onderweg zijn. Dit model is eenvoudig op te klappen waardoor u hem gemakkelijk mee kunt nemen als u met de auto of het vliegtuig reist.

Het Eloflex Model L is een uitstekende optie voor wie kiest voor eenvoud en gemak. Met de massieve achterbanden hoeft u zich geen zorgen te maken over lekke banden. Het slanke en wendbare formaat is met name voordelig in binnenshuis, waar u moeiteloos door smalle deuropeningen en in krappe ruimtes kunt navigeren.



GEWICHT IN KG

25,5

ACTIERADIUS IN KM

30

ZITHOOGTE IN CM

52

MAX. GEWICHT GEBRUIKER IN KG

120

VERMOGEN IN WATT

2X 200

MODEL P

Eloflex P heeft een ingebouwde elektrische kantelfunctie in de zitting, ontworpen om het in- en uitstappen te vergemakkelijken. Dit model is bedoeld voor mensen die moeite hebben met staan en opstaan uit een standaard rolstoel. Met de sta-op functie is de de transfer gemakkelijker en veiliger. De elektrische sta-op functie maakt de transfer niet alleen gemakkelijker, maar ook veiliger. Maar ook wordt zo ook mogelijk om hoger gelegen plekken te bereiken zoals hoge kasten en planken, zowel thuis als in de winkel.

Model P heeft een hogere zithoogte dan onze andere modellen, wat het uitstappen nog makkelijker maakt. Hierdoor is de Eloflex P een uitstekende keuze voor wat langere gebruikers.



GEWICHT IN KG

28

ACTIERADIUS IN KM

30

ZITHOOGTE IN CM

54

MAX. GEWICHT GEBRUIKER IN KG

160

VERMOGEN IN WATT

2X 250

MODEL D2

De Eloflex D2 heeft hetzelfde slanke, opklapbare ontwerp als onze andere elektrische rolstoelen, maar met een slimme twist - hij kan in twee delen worden gesplitst. Deze twee delen zorgen voor een laadgewicht van 14 en 16 kg, waardoor het gemakkelijker wordt om de stoel in de auto te laden en te vervoeren.

Het stabiele D2-model is geschikt voor gebruikers met een gewicht tot 160 kg. Eloflex D2 stelt u in staat een actief leven te leiden, of u nu gaat wandelen, reizen of alledaagse uitstapjes maakt.



GEWICHT IN KG

14 + 16

ACTIERADIUS IN KM

30

ZITHOOGTE IN CM

50

MAX. GEWICHT GEBRUIKER IN KG

160


VERMOGEN IN WATT

2X 250

MODEL H

Met Eloflex Model H hebben we iets unieks gemaakt - een krachtige elektrische rolstoel die speciaal is ontworpen voor onze zwaardere en langere gebruikers en die geschikt is voor gebruikers met een gewicht tot 200 kg. De stevige rolstoel kan echter ook worden opgevouwen en vervoerd in een gewone auto.

Model H is een ruime rolstoel met geweldige rijeigenschappen. Dit model biedt veel comfort dankzij de royale zitbreedte, comfortabele zithoogte, zelfs voor langere personen.

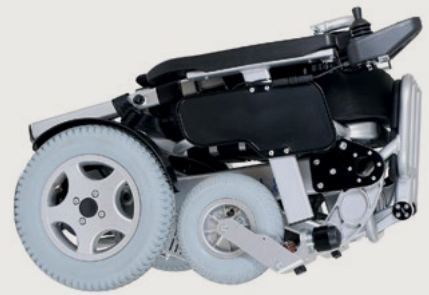

GEWICHT IN KG

43

ACTIERADIUS IN KM

40

ZITHOOGTE IN CM

54

MAX. GEWICHT GEBRUIKER IN KG

200

VERMOGEN IN WATT

2X 400

MODEL K

Eloflex K is een compacte, lichtgewicht en opklapbare elektrische rolstoel die is ontworpen voor kinderen en tieners van 7 tot 15 jaar. Model K stelt kinderen en jongvolwassenen in staat om actief deel te nemen aan hun omgeving, zodat ze gemakkelijker kunnen deelnemen aan alledaagse activiteiten zoals schoolreisjes, winkelen, dineren, excursies en het bezoeken van vrienden en familie - en dat alles zonder speciaal vervoer.

Het K-model heeft een compact en lichtgewicht ontwerp, met dezelfde elegante esthetiek als de andere Eloflex-modellen. De stoel is zorgvuldig ontworpen om zich aan te passen aan de groei van de gebruiker en kan eenvoudig in hoogte en breedte worden versteld om aan de veranderende behoeften van het kind te voldoen.



GEWICHT IN KG

26

ACTIERADIUS IN KM

30

ZITHOOGTE IN CM

47-52

MAX. GEWICHT GEBRUIKER IN KG

90

VERMOGEN IN WATT

2X 250

MODEL Z

Eloflex Z staat bekend als de meest exclusieve opklapbare elektrische rolstoel die er is, zowel in ons eigen assortiment als op de markt. Dit model is op maat gemaakt voor mensen die het 'beste van het beste' willen en de hoogste eisen stellen aan hun hulpmiddel. Het frame is gemaakt van koolstofvezel en heeft een uitzonderlijk laag gewicht van slechts 23 kg. Het formaat is compact, flexibel en opklapbaar.

De zorgvuldig ontworpen functies en ingenieuze details bieden de meest geavanceerde mogelijkheden op de markt, waardoor een optimale zit mogelijk is. Ongeëvenaarde rijprestaties, een buitengewone actieradius tot 45 km en een uitzonderlijke betrouwbaarheid zijn slechts enkele voorbeelden van de unieke kwaliteiten van het model.



GEWICHT IN KG

20

ACTIERADIUS IN KM

30

ZITHOOGTE IN CM

52

MAX. GEWICHT GEBRUIKER IN KG

120

VERMOGEN IN WATT

2X 250

MODEL C3

De Eloflex C3 combineert de meest gewaardeerde kenmerken van een Eloflex met het geavanceerde voordeel van een koolstofvezel constructie, waardoor hij ongelooflijk licht is en je perfecte metgezel voor dagelijks gebruik.

Met een gewicht van slechts 20 kg heeft de Eloflex C3 een slank ontwerp, aangevuld met stevige wielen en krachtige Eloflex motoren, die zorgen voor een superieure en soepele rijervaring. Met een maximaal gebruikersgewicht van 160 kg en extra ruimte voor extra accu's is de Eloflex C3 ontworpen om aan al uw verwachtingen te voldoen en deze te overtreffen.



GEWICHT IN KG

20

ACTIERADIUS IN KM

30

ZITHOOGTE IN CM

55

MAX. GEWICHT GEBRUIKER IN KG

160

VERMOGEN IN WATT

2X 250

MODEL X

Eloflex X is een uniek ontwerp dat doet denken aan een conventionele, manuele rolstoel. Het is de meest populaire elektrische rolstoel onder senioren, mede door het bekende kruis-frame. De stoel opklappen is zeer eenvoudig en door iedereen te doen.

Model X is ontworpen op basis vele vragen en verzoeken van onze gebruikers. Het is een 'no-nonsense' model met alle functies en mogelijkheden die u maar wenst.



GEWICHT IN KG

25

ACTIERADIUS IN KM

25

ZITHOOGTE IN CM

51

MAX. GEWICHT GEBRUIKER IN KG

120

VERMOGEN IN WATT

2X 250

MODEL S1

Met Eloflex' baanbrekende en unieke hybride scooter kunt u zich moeiteloos binnen en buiten bewegen, terwijl u de scooter gemakkelijk in uw auto kunt vervoeren of mee kunt nemen op een vlucht. Dus niets houdt u tegen om lange wandelingen te maken, te winkelen, vrienden en familie te ontmoeten en te reizen.

Een lichtgewicht scooter die makkelijk mee te nemen is, maar toch robuust genoeg voor buitenavonturen in uitdagende omgevingen. De Eloflex S1 is gebouwd om alle seizoenen te weerstaan, inclusief de strenge Scandinavische winters, waardoor de scooter een veelzijdige en betrouwbare keuze is voor mobiliteit het hele jaar door.



GEWICHT IN KG

37,5

ACTIERADIUS IN KM

30

ZITHOOGTE IN CM

55-60

MAX. GEWICHT GEBRUIKER IN KG

120

VERMOGEN IN WATT

2X 250

ACCESSOIRES

Maak uw Eloflex nog beter door hem aan te passen aan uw persoonlijke wensen en eisen met onze populaire en slimme accessoires.



ELOFLEX PREMIUM KUSSENST

Ease by Eloflex biedt een reeks ergonomische kussens van Zweedse makelij, ontworpen voor nog meer comfort.



ZIJTAS

Met de Eloflex-zijtas kunt u spullen zoals uw portemonnee, telefoon en andere waardevolle spullen gemakkelijk opbergen.



JOYSTICK VERLENGINGEN

Eloflex biedt twee verschillende verlengstukken voor joysticks om te voorzien in een breed scala aan behoeften.



VERSTELBARE HOOFDSTEUN

De Eloflex-hoofdsteun is een zeer veelzijdige optie voor extra hoofd- en neksteun, ontworpen om het comfort en de bruikbaarheid voor gebruikers met verschillende behoeften te vergroten




BEGELEIDERSBETURING

Dankzij de begeleidersbesturing kan iemand die achter of naast de rolstoel loopt de elektrische rolstoel besturen met behulp van de joystick.



BESCHERMENDE REISHOES

Onze beschermende reishoes is het perfecte accessoire voor liefhebbers van elektrische rolstoelen van Eloflex die kieskeurig zijn over hun stoel en extra voorzorgsmaatregelen willen nemen tijdens het vervoer

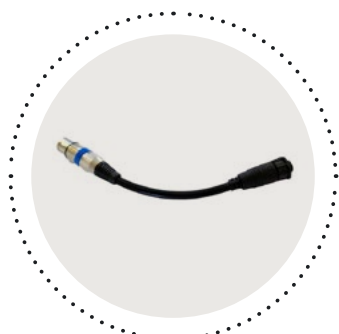

OPLAADADAPTER

Met de Eloflex-oplaadadapter kunt u de oplader rechtstreeks op de accu aansluiten.



VERSTELBARE VOETSTEUN

Met onze verstelbare voetsteun kunt u de hoek van de voetplaat instellen van 0 tot 90 graden.



OPRIJPLATEN

Laad uw Eloflex gemakkelijk in de auto met behulp van oprijplaten die inklapbaar en gemakkelijk op te tillen zijn.

EASE VERBETERT UW ELOFLEX-ERVARING

Langdurig zitten kan tot veel ongemak leiden met in het ergste geval decubitus (doorzitwonden). De ergonomische zitkussens in ons Ease by Eloflex helpen onnodig ongemak te voorkomen. De kussens verlichten helpen ook vaak bestaande pijn in bijvoorbeeld de rug te verminderen.

Ons doel is om uw comfort te verhogen. Dit is de essentie van Ease – een ergonomische oplossing voor actieve gebruikers die vaak veel tijd zittend doorbrengen en hun welzijn willen verbeteren tijdens tochtjes, uitstapjes of dagelijkse activiteiten.

PREMIUM KUSSEN – EASE ONE

Ease One is een zacht en ultracomfortabel premium kussen dat is ontworpen voor mensen die langere tijd zitten. Het kussen heeft een boxspring dat onder de bilspieren en het staartbeen is geplaatst. De contouren zijn ook gevormd om de ondersteuning en stabiliteit van de dijen te verbeteren. Ease One is bijzonder geschikt voor gebruik in elektrische rolstoelen omdat de geavanceerde boxspring de rug en het stuitje beschermt op oneffen oppervlakken.

PREMIUM KUSSEN – EASE WEDGE

De Ease Wedge is een wigvormig kussen dat aan de voorkant verhoogd is. Het is speciaal ontworpen om het comfort te verbeteren van mensen met langere benen die langere tijd zitten. Het ergonomische ontwerp verdeelt de druk en biedt een zacht gevoel dat zowel de dijbenen, de zitbotjes van het bekken als het staartbeen ontlast.

EASE ARMSTEUNKUSSEN

Het Ease-armsteunkussen is een pluche armsteunhoes die speciaal is ontworpen voor uw Eloflex. De 1 cm dikke, zachte schuimvulling beschermt u tegen trillingen en vermindert het risico op decubitus en irritatie. Het verbetert ook de stabiliteit en voorkomt dat uw arm van de armleuning glijdt.

EASE TUBE


Ease Tube is een zachte schuimrubberen bekleding voor de rugleuning van uw Eloflex. Deze geeft een zachter en aangener gevoel wanneer u achterover leunt in uw stoel. U krijgt ook extra ruggensteun en comfort wanneer u over oneffen oppervlakken rijdt.

EASE-LENDESTEUN

De Ease-lendensteun is gemaakt van stevig en duurzaam visco-elastisch 'memory'-schuim. In tegenstelling tot gewoon schuim reageert traagschuim op lichaamswarmte en druk, wordt het zachter en vormt het zich naar de lumbale 'lagere' wervelkolom om vermoeidheid van de rug te verminderen.

EASE-INCONTINENTIEHOES

Omgaan met incontinentie terwijl u in een rolstoel zit, hoeft niet stressvol of ingewikkeld te zijn. Onze waterdichte incontinentiehoes vereenvoudigt en beschermt uw dagelijkse leven en biedt uitstekende bescherming tegen regen en vocht als u buiten bent.

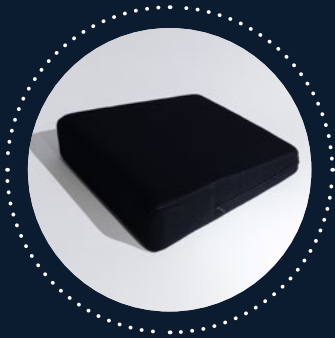

Wanneer het leven plotseling verandert

MARIE VOND ECHTE VRIJHEID MET ELOFLEX



Hopptimisten, of Marie Hav Lunkvist zoals ze eigenlijk heet, heeft een achtergrond als actieve zakenvrouw die momenteel door ziekte in een rolstoel zit. Ze ziet het leven als een geschenk en is vervuld van hoop en optimisme!

Ik kreeg mijn Eloflex in februari 2018, ik had toen ongeveer zes jaar andere rolstoelen gehad. Ik ben een actief persoon die veel reist met lezingen en ik ben betrokken bij veel verschillende gemeenschapstaken, zowel privé als met het gezin. Ik reis zowel naar de bergen als naar de archipel en het werd voor mij absoluut noodzakelijk om bij deze gelegenheden een flexibele en lichtgewicht elektrische rolstoel te hebben.

Het is niet alleen wanneer ik reis dat ik de Eloflex bij me heb, maar alles van het niet binnenkomen in drukke winkels of alledaagse dingen zoals de deur van de burens die te smal is voor mijn gewone elektrische rolstoel, is nu een herinnering. Ik hoef me geen zorgen meer te maken dat ik niet kan doen



wat ik wil, wanneer ik dat wil en op mijn eigen voorwaarden. Dat is pas echt vrijheid!

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL	F	L	P	D2	H	K	C	Z	C3	X	S1
NETTO GEWICHT	27 kg	25,5 kg	30 kg	14+16 kg	42,5 kg	28,5 kg	16 kg	23 kg	20 kg	25 kg	37,5 kg
BEREIK	30 km	30 km	30 km	30 km	40 km	30 km	15 km	30 km	30 km	25 km	30 km
MAX. GEWICHT GEBRUIKER	120 kg	120 kg	160 kg	160 kg	200 kg	90 kg	100 kg	120 kg	160 kg	120 kg	120 kg
SNELHEID	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	8 km/h	6,5 km/h	6 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	9 km/h
BATTERIJ	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 20AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 12AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V
DRAAICIRKEL	78 cm	76 cm	85 cm	89 cm	99 cm	78 cm	60 cm	78 cm	87 cm	88 cm	100 cm
WIELEN VOOR	8" solid	8" solid	8" solid	8" solid	9" air	8" comfort	7" solid	8" comfort	10" air	8" solid	12" air
WIELEN ACHTER	12" air	10" solid	12" air	12" air	13" air	12" air	8,5" solid	12" air	12" air	12" air	12" air
HOOGTE ZITTING	52 cm	52 cm	54 cm	50 cm	54 cm	47-52 cm	47,5 cm	52 cm	55 cm	51 cm	55-60 cm
BREEDTE ZITTING	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	51/56/61 cm	36-44 cm	44 cm	49 cm	43 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm
DIEPTE ZITTING	43-48 cm	43-48 cm	43-48 cm	44-47 cm	51 cm	36 cm	42 cm	45 cm	44 cm	43-48 cm	40 cm
AFMETINGEN (HXBXD)	95x63x100 cm	95x59x99 cm	90x62x107 cm	96x62x107 cm	103x66x115 cm	89x63x100 cm	93x57x93 cm	100x62x110 cm	95x63x100 cm	100x62x102 cm	91x63x105 cm
AFMETING INGEKLAPT (HXBXD)	75x63x40 cm	70x59x35 cm	74x62x40 cm	67/52x63/63x50/35 cm	83x66x45 cm	75x55x36 cm	79x57,5x32,5 cm	75x64x37 cm	75x63x40 cm	76x32x78 cm	55x63x105 cm

Nettogewicht exclusief batterijen. Aanbevolen luchtdruk voor luchtgevulde wielen = 2,5 kg. Eloflex is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel bij het Zweeds Geneesmiddelenbureau en voldoet aan de toepasselijke eisen in de EU-verordening (2017/745), Medical Device Regulations (MDR), die de veiligheid en prestaties van medische hulpmiddelen waarborgt. Het is CE-goedgekeurd, getest en goedgekeurd volgens EN12184, ISO-7176, IEC-60601 en de batterijen zijn vluchtgoedgekeurd volgens UN38.3.

Ga naar www.eloflex.eu voor lokale informatie, video's, foto's en de dichtstbijzijnde reseller.



Eloflex HQ

Hammarbacken 4B
191 49 Sollentuna
SWEDEN